

# COMFORT BOX

HILO



# COMFORT BOX HILO

De **Comfort Box HiLo** voegt een extra dimensie toe aan de troeven van een boxspring: een **onzichtbaar hoog-laag mechanisme** volledig geïntegreerd in het boxspring kader. Een designmeubilair zonder visuele compromissen, maar met **comfort en functionaliteit in het hart van het ontwerp**.

De boxspring heeft een uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v draagarmen. Bovendien verhoogt de motorvrije onderwagen de **toegankelijkheid en het reinigingsgemak**.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES


- De boxspring is mogelijk op afmetingen 90/100/180/200cm x 200/210cm
- Hoogte-variatie ligvlak (zonder matras): +/- 32cm → +/- 80cm
- **Veilig werkgewicht** : 200kg (incl.matras)
- Het ligvlak is voorzien van een **ventilerende anti-slip** doek met velcro stroken voor eventuele fixatie van de matras
- De Comfort Box Hilo voldoet aan de **hoogste normen** in de zorgsector
- Inclusief **handbediening met fixatiehulp** dmv magneet
- Inclusief **wielen** om bed te verplaatsen in de kamer
- Inclusief **nachtlicht** onder bed

# KIES UW BOXSPRING

De Revor Comfort Box kan **geleverd worden in vaste, elektrische en HiLo versie**. Je kan kiezen voor een vaste of elektrische box met hoogte 27cm of voor een HiLo box met hoogte 32cm → 80cm.

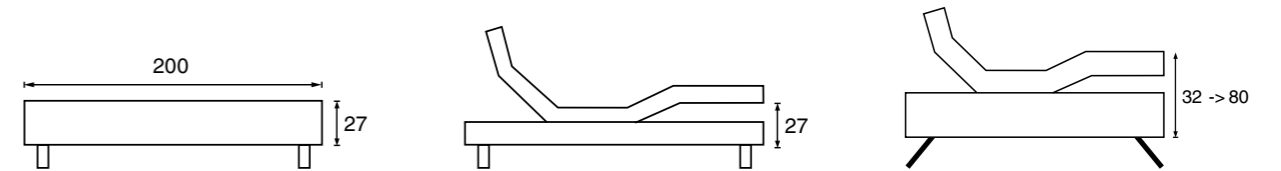

# ELEKTRISCHE BEDMANIPULATIES

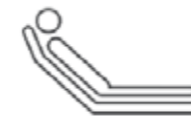

## RUGVERSTELLING

Rugverstelling tot 55° met simultane hoofdknik



## KNIEVERSTELLING

Knieverstelling tot 35°



## HOOG/LAAG VERSTELLING

Hoog-laag verstelling van +/- 32cm tot +/- 80cm. Bij het verstellen in deze positie zal de boxspring altijd een **tussenstop** voorzien op een uitstaphoogte van ongeveer 40cm.



## SLAAPPOSITIE

Deze verstelling kan gebeuren via de **handschakelaar**, hierdoor wordt het mogelijk door één druk op de knop alle ligvlakdelen horizontaal te brengen terwijl het bed zich naar de **laagste positie** begeeft.



## RELAX/ZETELPOSITIE



## LEGS-UP POSITIE

Voetzijde 10cm (3°) hoger dan hoofdzijde.



## ANTI-TRENDELEN-BURGPPOSITIE



# ACCESSOIRES

## SERUMHOUDER



De serumhouder is **360° verstelbaar** en bevat een haakje voor het ophangen van een serum.



## BEDGALG

De bedgalg is **90° verstelbaar** en zwenkt nooit buiten het ligvlak.

# PRIJZEN

Voor andere lengtes en/of breedtes, vraag info bij uw dealer.

+ POTEN A/B/C/FUNDAMENTAL VAST: SET (5ST) ELEKTRO: SET BASIC (4ST) HILO: SET BASIC (4ST)							
		COMFORTBOX VAST		COMFORTBOX ELEKTRO		COMFORTBOX HILO	
		MONO		MONO		MONO	
LENGTE: 200CM		90	100	90	100	90	100
ZONDER MATRAS	CAT 20	770	876	1346	1540	3247	3727
	CAT 30	840	959	1476	1690	3568	4096

OPTIES							
		90	100	180	200		
HOOFDBORD DIRECTO, CLASSICO, UNI, VITELLO DIRECTO, VITELLO CLASSICO	CAT 20	+€371		+€471	+€551		
	CAT 30	+€407		+€519	+€606		
HOOFDBORD TORSO, STRETTO, LINEA, KRIOS, SIGNO, MONDRIAAN, VITELLO SERIE	CAT 20	+€421		+€551	+€631		
	CAT 30	+€462		+€606	+€696		
NEERSCHUIFBARE OPSTAHULP	CAT 10	+€355		+€355	+€355		
	CAT 20	+€355		+€355	+€355		
	CAT 30	+€391		+€391	+€391		
SERUMHOUDER		+€240		+€240	+€240		
BEDGALG		+€320		+€320	+€320		
COMFORT AID SET: SERUMHOUDER + BEDGALG		+€412		+€412	+€412		



www.revor.be